


Beauty for You

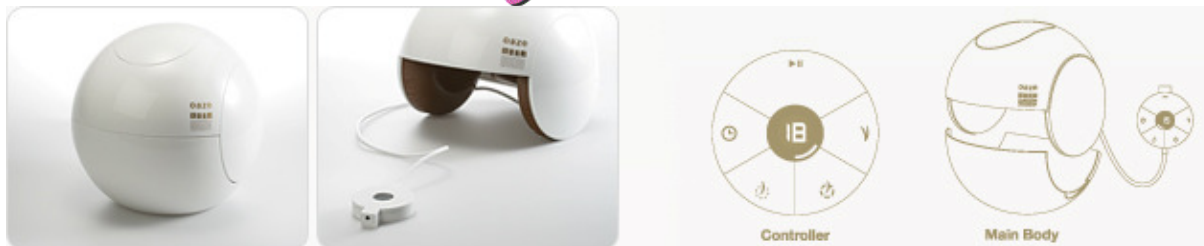

O Oaze

Wszechobecny stres, niezdrowy tryb życia, zaburzenia równowagi hormonalnej, różnorodne choroby, starzenie organizmu, powszechne stosowanie preparatów uzyskiwanych na drodze syntezy chemicznej w kosmetykach i ulepszaczy żywności stanowią czynniki mające wpływ na stan naszych włosów i skóry. Czynniki te mogą powodować okresowe bądź trwałe wypadanie włosów, prowadzące do ich przerzedzenia i często do wyłysienia. Nie sposób się przed nimi ustrzec, ale możemy sobie pomóc sięgając po zdobycze nowoczesnej technologii. W czasach, gdy wygląd zewnętrzny odgrywa bardzo istotną rolę zwracamy uwagę jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie, dbamy o swój wygląd i samopoczucie. Kult młodości to nie tylko szczupła sylwetka, twarz bez zmarszczek i brak siwych włosów, ale przede wszystkim posiadanie włosów, najlepiej mocnych, gęstych i lśniących.


Tych z Państwa, którzy mają problem z w wypadaniem włosów, przerzedzeniem czy łysieniem lub chcących stosować profilaktykę, aby dłużej cieszyć się pięknymi włosami, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – jedynym na świecie, opatentowanym, hełmowym laserem stymulującym ukrwienie i wzrost włosów i skutecznie hamującym ich wypadanie. Laser ma udowodnione klinicznie działanie oraz posiada certyfikaty bezpieczeństwa CE i FDA.

Oaze


Oaze jest laserem powstrzymującym utratę włosów, oraz stymulującym wzrost nowych włosów, dzięki terapii z wykorzystaniem niskoenergetycznego lasera (LLLT).

Dzięki Oaze odzyskasz nowe i mocne włosy. Brak skutków ubocznych oraz bólu.

Oaze hamuje wypadanie włosów oraz przyspiesza i wzmacnia porost włosów bezboleśnie oraz bez jakichkolwiek skutków ubocznych.

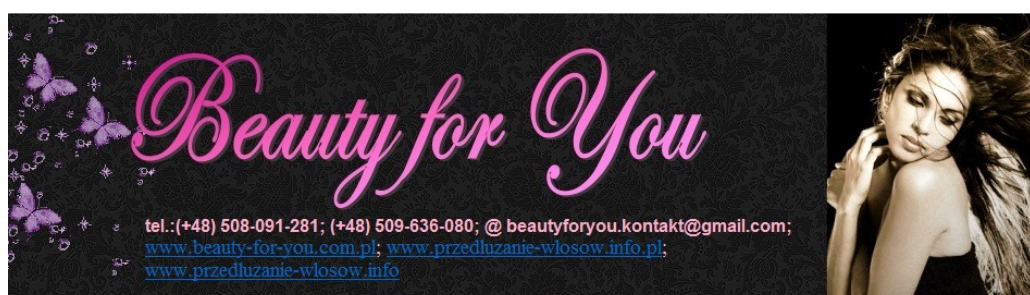



Beauty for You

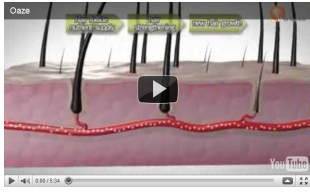


1. Laser chroniący przed wypadaniem włosów

Urządzenie zbudowane jest z gęsto rozłożonych laserów oraz mechanizmów wibrujących. Stymuluje ono skórę głowy oraz mieszki włosowe, wzmagając odżywienie i dotlenienie włosów. Dodatkowo odpowiednia waga urządzenia stymuluje skórę poprzez akupresurę, co z wielokrotnia efekt działania lasera i wibracji.

2. Równomiernie rozłożone lasery naświetlają całą skórę głowy

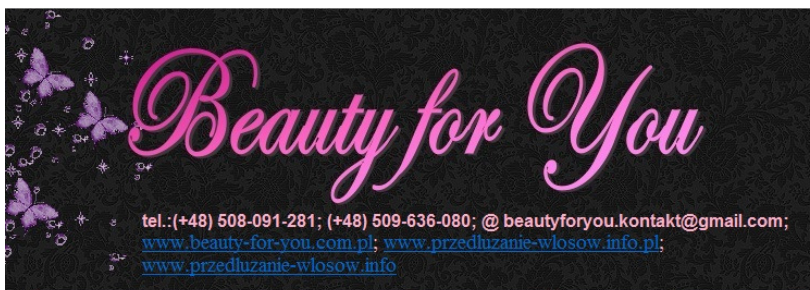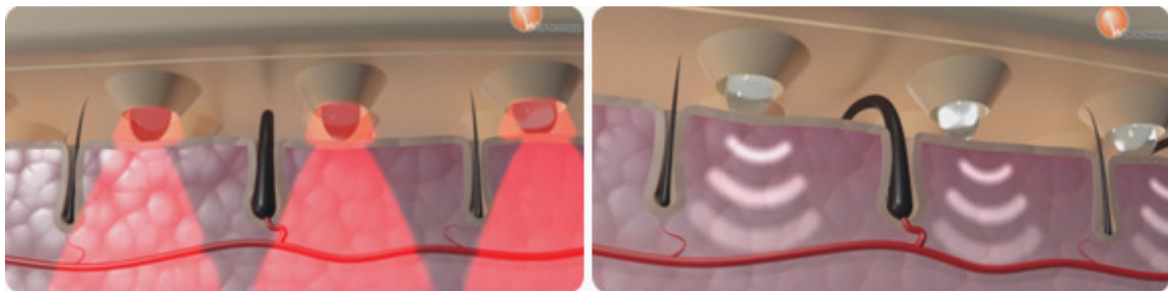

tel.: (+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info



Beauty for You


3. Pierwsze tego typu urządzenie medyczne na świecie

Możesz używać Oaze gdziekolwiek - podczas oglądania telewizji, czytania gazety lub rozmowy! Urządzenia LLLT w postaci szczotki laserowej, wymagają trzymania i masowania, co może powodować zmęczenie rąk i bóle ramion. Z powodu tych trudności profilaktyka stosowania LLLT była bardziej uciążliwa. Dzięki pierwszemu na świecie tego typu urządzeniu, wystarczy je tylko nosić, dbając o zdrowie włosów w komfortowej pozycji.




Działanie oaze

Zdjęcia włosów przed stosowaniem Oaze, oraz po 12-24 tygodniowym stosowaniu Oaze.


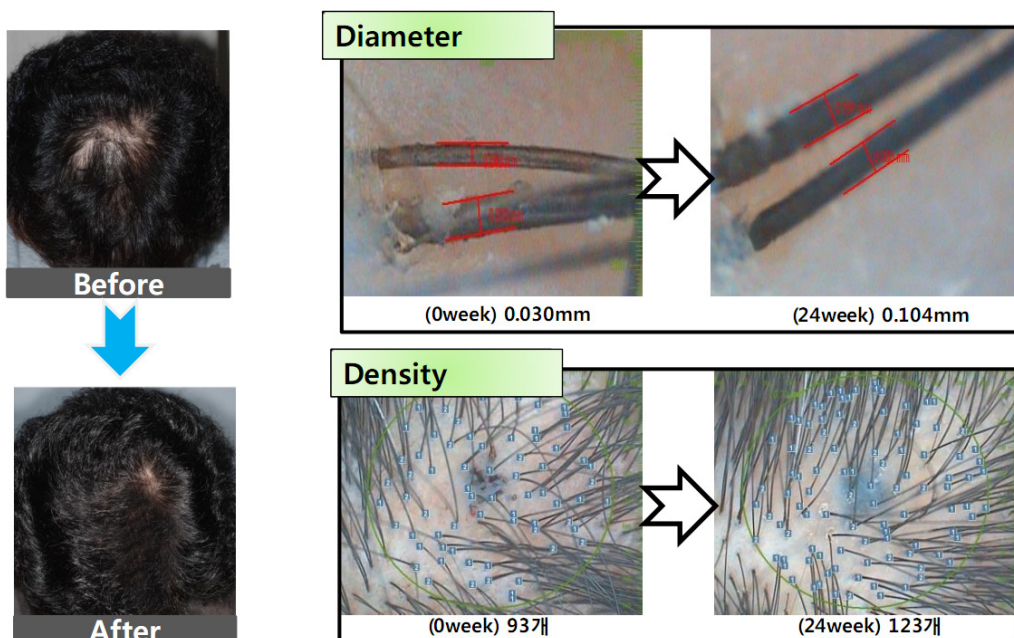


tel.: (+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info





Beauty for You

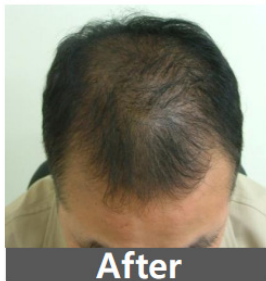



Diameter

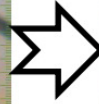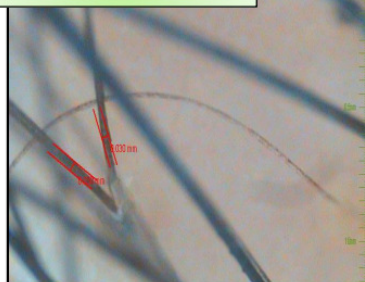



Density

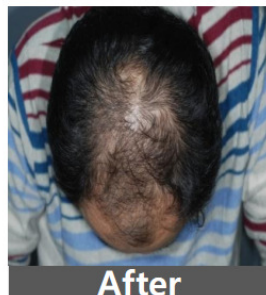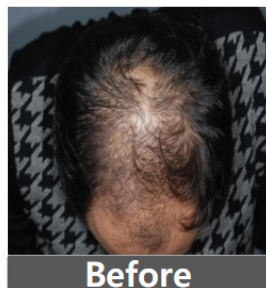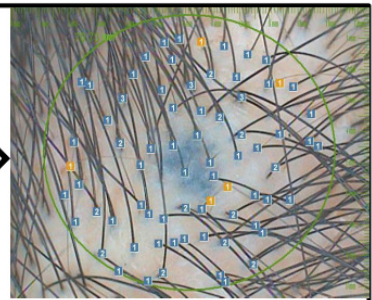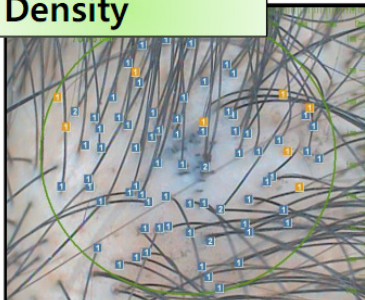

Diameter

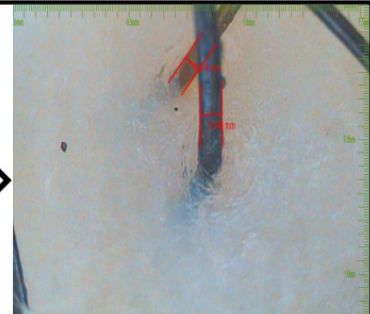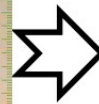

Density

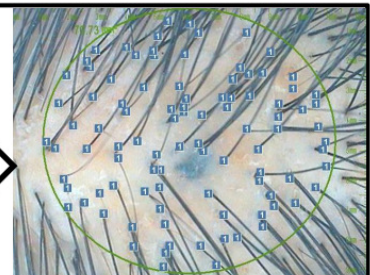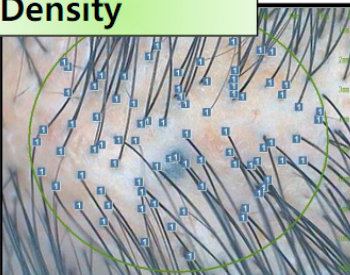

Beauty for You

tel.:(+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info

Beauty for You




Before




After

Diameter

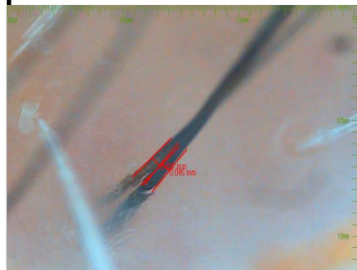


(0week) 0.046mm

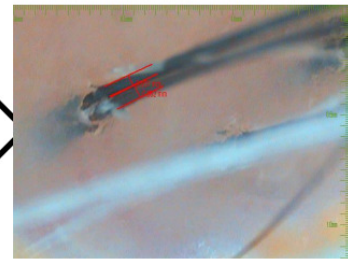

(12week) 0.062mm

Density

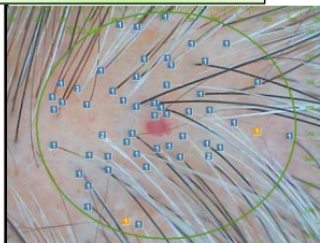


(0week) 81개




(24week) 131개

Diameter

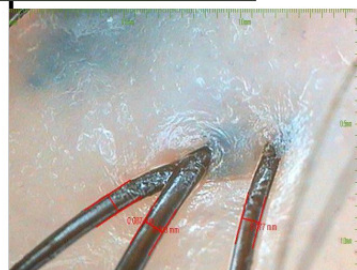

(0week) 0.077mm

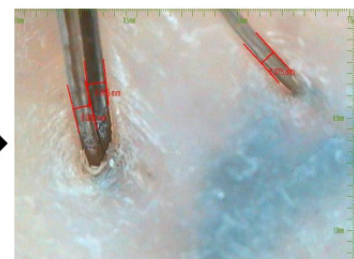


(12week) 0.085mm

Density




(0week) 92개

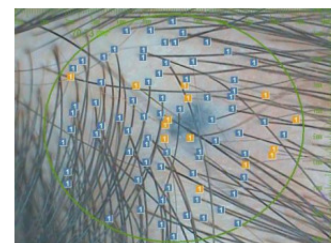

(24week) 120개



Before

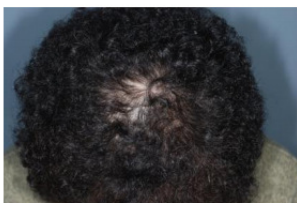

After

Beauty for You


tel.:(+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info

Beauty for You



Sposób użycia

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Usiądź i załóż Oaze przy pomocy obu rąk.
3. Włącz urządzenie przy pomocy włącznika.
4. Za pomocą pilota wybierz pożądany tryb oraz czas. Naciśnij przycisk start.
5. Mode1 – sam laser.
6. Mode2 – same wibracje.
7. Mode3 – laser wraz z wibracjami.
8. Czas działania może być ustawiany z 3 minutowym interwałem, do 24 minut (standardowo 18 minut).
9. Na 3 sekundy przed zakończeniem usłyszysz dźwięk.
10. Wyłącz i zdejmij urządzenie.

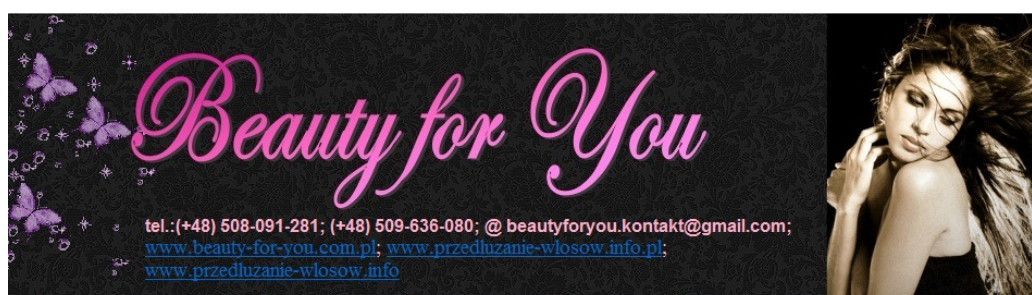

Beauty for You

CERTYFIKATY:



oaze KFDA certification



oaze CE certification



ISO 13485:2003



ISO 9001-2008 certification



Patent certification



Patent Proof certification



Promising Export Small & Medium Business



Hair Growth Stimulation Laser Cap Patent



Solid state laser equipment

Beauty for You

tel.:(+48) 508-091-281; (+48) 509-636-080; @ beautyforyou.kontakt@gmail.com;
www.beauty-for-you.com.pl; www.przedluzanie-wlosow.info.pl;
www.przedluzanie-wlosow.info